

Mi ez a csoda (Hőtasak, Magic-Therm, TermoKlik)?

Lehetővé teszi számunkra, hogy bárhová kellemes meleget vihessünk magunkkal. A belül lévő folyadék kikristályosodása során nagy mennyiségű hőt képes leadni. A kristályosodás folyamatát a felhasználó indíthatja el bármikor. Használat után egyszerűen, gyorsan regenerálható, több-százszor felhasználható.

A termékcsalád széles körben alkalmazható a gyógyászat területén, reumatikus végtag-, derékfájás, fülfájás, izomhúzódás enyhítésére; téli szabadtéri sportolásnál, hideg, nedves időben kempingezés, vadászat, horgászás során; szépségápolásnál, és még számos területen.

Előnye, hogy elektromosságtól függetlenül alkalmazható, valamint a regenerálás során felülete fertőtleníthető a forró vízben.



Hogyan működik (Magic-Therm)?

Indítás

A belül úszó körlemezeket ujjaink közé fogva néhányszor megpattintjuk, föl-le hajlítjuk, mire a folyadék fehéren kristályosodni kezd, és tartalma felmelegszik kb. 50°C-ra. Miközben a folyadék kikristályosodik, előnyös, ha a termékhez kapható hőszigetelő-rögzítő tokba helyezzük, majd tegyük a melegítési kívánt testrészre. A meleg **Magic-Therm** tasak a külső hőmérséklettől és a hőszigeteltségtől függően 0,5-1,5 óra alatt fokozatosan hűl le.

Regenerálás

Tegyük a kihűlt, megkeményedett **Magic-Therm** terméket vízzel teli fazékba (célszerű az edény alját, oldalát egy darab textíliával kibélelni, hogy ne égessen oda). Forraljuk a vizet -- kb. 15-20 perc -- míg a **Magic-Therm** tasakban levő fehér kristályok teljesen feloldódnak, és átlátszó folyadékká válik ismét. Kivéve a fazékból, kihűlés után a tasak bármikor újra felhasználható. Amennyiben a regenerálást túl korán befejezi, és nem alakult át maradéktalanul az összes kristály folyadékká, akkor a kihűlés közben ismét kikristályosodik (meg kell ismételni a regenerálást).

TILOS mikrohullámú sütőben regenerálni!

Alkalmazási területek

Gyógyászat

Reumatikus végtagi- és derékfájás, fülfájás, menstruációs görcsök, izomhúzódás enyhítésére, hidegrázás, keringési zavarok ellen továbbá olyan esetekre, amikor az orvos "dunsztkötéses" borogatást javasol.

Sport és Pihenés

Ideális megoldás megfázás, meghűlés megelőzésére szabadtéri sportoknál (síelés, korcsolyázás, szánkózás), motorozáskor, kempingezéskor, a vadászat, horgászás hosszú órái alatt hűvös, nedves időben.

Kozmetika

Felmelegítve elősegíti a kozmetikában alkalmazott arcpakolások bioaktív anyagainak gyorsabb felszívódását. Sokkal kényelmesebb, mint a korábban ezen a területen alkalmazott elektromos, vagy gőzölő eszközök, ráadásul nem tud megégetni, mert hőmérséklete nem emelkedik 52 fok fölé.

Műszaki és háztartási területek

Könnyen használható eszközök felmelegítésére vagy melegen tartására, ami lehet egy gépkocsi olajsűrője vagy egy cumisüveg. Gyakran használják hópalack helyett ágyak előmelegítésére.

Veszélytelen

A **Magic-Therm** tasak tartalma Nátrium-acetát vizes oldata, mely nem mérgező, nem egészségkárosító. Ha kilyukad, többé nem használható, tartalma azonnal kikristályosodik, és a kristályok könnyen eltávolíthatók, ruhából szokásos módon kimosható. Ha bőrre vagy szembe kerül, egyszerűen mossuk le vízzel.

MAGIC-THERM




01_Mini

955 Ft



02_Kör, Kocka, Szív

1 055 Ft

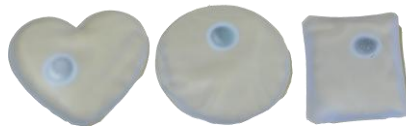


03_Kéz-Térdmelegítő

1 590 Ft



04_Derékmelegítő

3 720 Ft

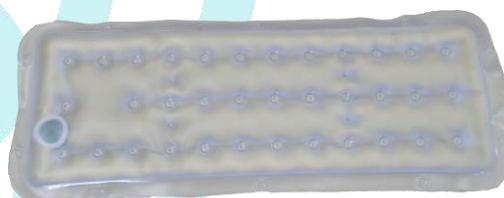

05_Talp S (32-35)

1 530 Ft

05_Talp M (36-39)

3 150 Ft

05_Talp L (40-43)

3 400 Ft


05_Talp XL (44-46)

3 720 Ft




06_Maszk

3 400 Ft

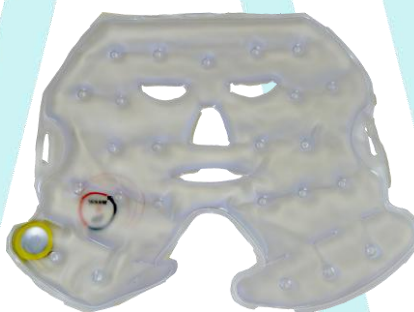


07_Nyakmelegítő

3 990 Ft

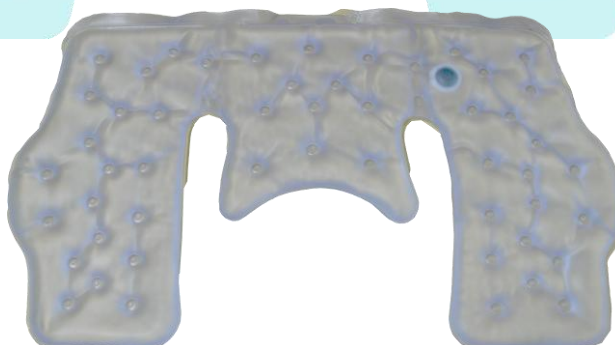

08_Ülőpárna 30x25 cm

4 360 Ft

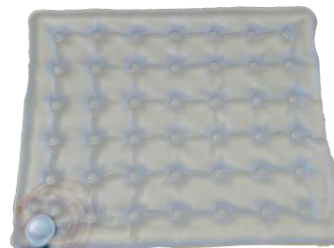

09_Fül tok

1 290 Ft



10_Kéz-Térd tok

1 290 Ft



11_Derék tok

4 460 Ft



12_Nyak tok

(csak tok, a képen zöld)

3 620 Ft



13_Ülőpárna tok

(csak tok, a képen zöld)

4 150 Ft



Lehetőség van reklámfeliratok
elhelyezésére, emblémázásra

